

## NÁVOD NA POUŽITÍ MATRACE

Autor: DDF STUDIO s.r.o

Související odkazy: [panmatraci.cz](http://panmatraci.cz)

Verze: 01

Datum tisku: 04/2018

Název souboru: [navod\\_na\\_pouziti\\_matrace\\_pdf](#)

Copyright ©Pan Matrací 2018

Všechna práva vyhrazena

Všechny obchodní známky či jména jsou majetkem příslušných vlastníků. DDF STUDIO s.r.o si vyhrazuje právo na změnu specifikací kdykoli bez upozornění. Informace, obsažené v tomto dokumentu, předkládá DDF STUDIO s.r.o ve snaze informovat přesně a správně. DDF STUDIO s.r.o však neodpovídá za důsledky plynoucí z použití těchto informací, porušení patentu nebo jiných práv třetích stran, které z použití těchto informací vyplýne

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek naší společnosti a věříme, že s ním budete spokojeni po celou dobu jeho užívání. Díky velmi pečlivému výběru materiálů, nejmodernější výrobní technologii a pečlivé práci našich pracovníků dosahují naše výrobky parametrů, které zaručují vysokou kvalitu, spolehlivost a trvalou užitnou hodnotu

## Obsah

---

1. Úvod .....	4
2. Bezpečnost.....	4
3. Bezpečnostní pokyny pro použití matrací .....	4
4. Použití matrací .....	5
5. Údržba potahu a jádra matrace .....	6
6. Čištění .....	6
7. Desinfekce .....	6
8. Praní.....	6
9. Sušení .....	7
10. Žehlení .....	7
11. Jádro matrace .....	7
12. Skladování.....	7
13. Ochrana životního prostředí .....	7
13. Likvidace matrace .....	8
14. Záruka a servis .....	9

## 1. Úvod

Pokud chcete, aby Vám Vaše matrace sloužila dlouhá léta a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny

## 2. Bezpečnost

Uvedený výrobek odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 10993. Výrobce pracuje podle certifikovaného systému řízení jakosti dle norem DIN EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003, ISO 14001:2004

## 3. Bezpečnostní pokyny pro použití matrací

- ✓ před použitím matrace je nutné se seznámit s jejím "Popisem a způsobem použití"
- ✓ matrace nesmí být používána, pokud byly zjištěny závady, které mohou poškodit zákazníka nebo matraci
- ✓ volba druhu a aplikace matrace musí být vždy konzultována s ošetřujícím lékařem
- ✓ matraci nelze pokládat na ložnou plochu, pokud by hrozilo její narušení nebo protržení potahu ostrými částmi lůžka nebo jinými ostrými předměty
- ✓ při dlouhodobém používání je potřeba sledovat stav jádra, zda u něho nedošlo k trvalé deformaci
- ✓ působením světla dochází ke změně odstínu barvy jádra matrace, která nemá vliv na změnu fyzikálních vlastností
- ✓ matrace může mít charakteristickou vůni, která časem vymizí

#### 4. Použití matrací



Před počátkem používání matrace je nutné seznámit se podrobně s tímto návodem. Veškeré úkony musí být prováděny v souladu s ním, jakékoli jiné použití jsou prováděna na vlastní riziko a výrobce neručí za případně vzniklé škody! Je důležité návod pečlivě uschovat až do doby likvidace matrace!



Matrace je nutné v pravidelných intervalech otáčet, zaměňovat stranu hlavy a nohou. Při otočení spodní stranou vzhůru je třeba vyjmout jádro matrace z potahu, otočit jej a vložit jej zpět o potahu. Potah není oboustranný, nelze zaměňovat horní a spodní stranu! Doporučený interval otáčení je minimálně 4x za rok. Toto je preventivní opatření proti trvalé deformaci jádra matrace!



Matraci je třeba umístit na vhodný typ ložné plochy s ohledem na velikost mezery mezi podélnými segmenty, která by neměla přesáhnout 3 cm. V případě ložné plochy bez otvorů pro cirkulaci vzduchu, například z HPL vysokotlakého laminátu, je třeba zajistit pravidelné větrání matrace. Toto je preventivní opatření proti znehodnocení jádra matrace vlhkostí



Při výběru matrace je třeba brát zřetel na rozměr ložné plochy lůžka, na které má být matrace použita. Z tohoto důvodu se nabízejí matrace v základních rozměrech s délkou 200 cm



Potah není oboustranný, nelze zaměňovat horní a spodní stranu! Je třeba zachovat orientaci potahu. Při převrácení spodní stranou vzhůru je třeba vyjmout jádro matrace z potahu, otočit jej a vložit jej zpět do potahu

### 5. Údržba potahu a jádra matrace

Výsledkem některých čistících postupů je výskyt drobného zvrásnění povrchu. Tento jev nemá žádný vliv na samotné vlastnosti výrobku.



Pro čištění, dezinfekci a praní nepoužívat látky obsahující formaldehydy nebo fenoly! Maximální povolená koncentrace roztoků chlorových dezinfekčních přípravků (Chloramin) je 0,5 % Po provedení desinfekce je vždy nutné povrch opláchnout čistou vodou a řádně vysušit.

### 6. Čištění

Povrchová znečištění lze odstranit jemnou textilií navlhčenou ve vodě s obsahem saponátového prostředku. Trvalejší znečištění lze odstranit otíráním alkoholem (methyl, líh) a následně horkou vodou s neutrálním čistícím prostředkem

### 7. Desinfekce

Desinfekci potahu lze provádět běžnými neutrálními desinfekcemi v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví (např. roztok chloroxylenolu 4,9 g/100 g vody, roztok 2-propanolu 50 ml/m<sup>3</sup> vody nebo 0,5 % chloraminový roztok). Po provedení desinfekce je vždy nutné povrch opláchnout čistou vodou a řádně vysušit

### 8. Praní

Nebarevné potahy lze prát při teplotě 50°C, barevné 30°C za použití běžných čistících prostředků

## 9. Sušení

Potah je nutno po všech čistících a pracích procedurách a před uskladněním řádně vysušit. Sušení provádíme zavěšením, kroucením či mačkáním při teplotách do 30°C



Potah nelze mandlovat!

## 10. Žehlení



Žehlení potahu je zakázáno

## 11. Jádro matrace

Samotné jádro matrace nevyžaduje větší čistící zásahy. Desinfekce jádra není nutná, postačuje desinfekce potahu. Je vhodné po dlouhodobějším užívání matraci vyvětrat (sejmout potah a uložit jádro matrace na vzdušném místě na 12-24 hodin)



Jádro matrace se nedoporučuje mýt vodou! Vlastní vahou nasáklé pěny může dojít k její destrukci.

## 12. Skladování

Skladujte v suchých a chladných prostorách. Při skladování matraci neohýbejte. Předcházejte přílišnému tlaku a styku s nestálobarevnými materiály.

## 13. Ochrana životního prostředí

Společnost DDF STUDIO s r.o. si je vědoma nezbytnosti ochrany životního prostředí pro budoucí generace a proto věnuje vysokou pozornost vývoji,


inovacím, projektování, výrobě a užívání takových technologií a materiálů, kterou jsou šetrné pro životní prostředí. Výrobek je konstruován z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí! Výrobek neobsahuje nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, PCB nebo CFC! Hlučnost výrobku splňuje požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Veškeré odpadní obaly vzniklé po uvedení výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Obalový odpad vzniklý při uvedení výrobku do provozu roztrďte dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k jeho dalšímu využití. Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové, plastové a elektronické součásti – pro účely optimální recyklace v době ukončení provozu výrobku separujte jednotlivé části tak, aby mohly být dále využity suroviny, ze kterých byl výrobek vyroben



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu!



### 13. Likvidace matrace

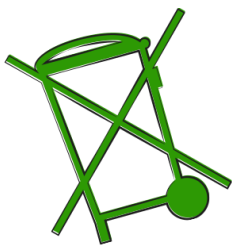

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že matrace nesmí být odstraněna (likvidována) společně s komunálním odpadem. Za účelem správného odstranění celého výrobku odevzdejte matraci na určených místech k tomuto účelu specializovaných firem, kde budou přijata zdarma. Vhodným odstraněním tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od pověřených úřadů ochrany životního prostředí, případně nejbližšího sběrného místa pro separovaný sběr odpadů.





V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### **14. Záruka a servis**

Pokud není smlouvou upraveno jinak, je na matraci poskytována záruka 24 měsíců počínaje dnem dodání uživateli! Záruka se vztahuje pouze na poruchu nebo poškození výrobku vzniklé nekvalitou použitých materiálů, výroby a montáže. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím výrobku v rozporu s návodem na použití nebo vadou vzniklou neobvyklým použitím výrobku. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizovaný servis na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení vydává výrobce.